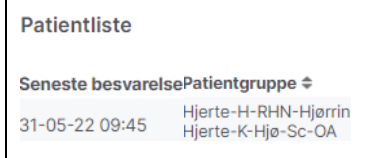
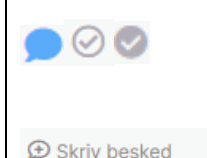

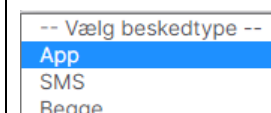
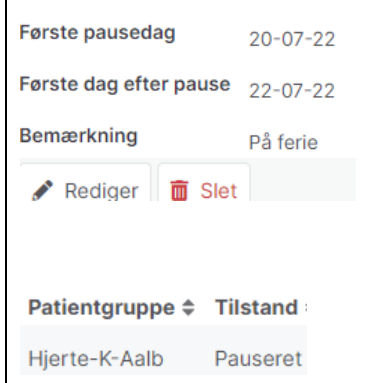
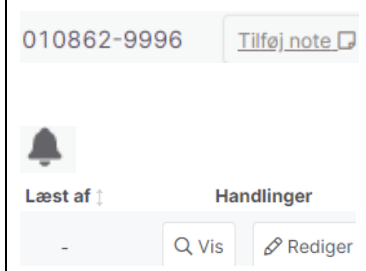


Find patient, opret Besked, Pausering og Note i OTH

Du kan via ikoner på Overblik komme direkte til det ønskede i Patientmenu fx beskeder til/fra patient.

Handling	Forklaring	Navigation
Find patient	<p>Vælg Find patient i Hovedmenu. Udfyld et eller flere felter. Du kan også søge på pårørendes telefonnr. Husk at ændre ved Status, hvis du søger på patient, der ikke længere er aktiv.</p> <p>Ved søgning på en Patientgruppe fremkommer Patientliste med alle patienter i patientgruppen. På listen ses hvornår patient er oprettet, tildelte patientgrupper og seneste besvarelse – og hvis patient aldrig har indsendt data.</p>	 <p>Patientliste</p> <p>Seneste besvarelsePatientgruppe ↕</p> <p>31-05-22 09:45 Hjerte-H-RHN-Hjörri Hjerte-K-HjØ-Sc-OA</p>
Se og opret Besked	<p>Besked er til ikke akut kontakt mellem patient og kliniker.</p> <p>Beskeder ses på Overblik når:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er ikke læst besked. Patient af anden grund er på Overblik fx indsendte målinger. <p>Den beskedtekst, der vises på Overblik, er altid fra sidste besked, uanset om denne er læst/ulæst eller til/fra patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blå taleboble: Ulæst besked fra patient Gråt "flueben" besked til patient": Lyst ulæst. Mørkt læst. Blankt "felt": Der er endnu ikke sendt besked til/fra patient <p>Besked tilgås via fanebladet Beskeder i Patientmenu. Fra Overblik tilgås besked via valg af tidligere besked eller via "Skriv besked" som ses, når musen holdes over patients navn.</p> <p>I Patientmenu ses beskeder til og fra patient og om de er set:</p> <ul style="list-style-type: none"> Til patient. Ikke læst: hvidt flueben. Læst: blå flueben. Fra patient. Markeret som læst når den er håndteret/set. 	 <p>Skriv besked</p>  <p>Mark read</p>
Opret patientgruppe besked	<p>Du kan sende en besked til alle patienter i én patientgruppe. Vælg Patientgruppe beskeder i Hovedmenu. Skriv indhold, vælg ønsket patientgruppe. Vigtigt vælg beskedstype App og Send.</p>	 <p>-- Vælg beskedstype --</p> <p>App</p> <p>SMS</p> <p>Begge</p>
Opret Pausering	<p>Pausering anvendes, hvis patient i en periode ikke indsender data. Ved pausering er patients monitoreringsplan sat i bero og der kommer ingen blå alarmer. Hvis perioden for pausering ikke er kendt fx grundet indlæggelse, pauseres for maks. 14 dage.</p> <p>Vælg Pausering i Patientmenu. Vælg Opret. Udfyld periode for pausering og årsag og Opret.</p> <p>Du kan efterfølgende redigere eller slette pausering.</p> <p>Patient er IKKE på Overblik under pausering, medmindre patient indsender data eller skriver en besked.</p> <p>Du kan se de patienter, der er pauseret, når du i Find patient søger på din patientgruppe.</p>	 <p>Første pausedag 20-07-22</p> <p>Første dag efter pause 22-07-22</p> <p>Bemærkning På ferie</p> <p>Rediger Slet</p> <p>Patientgruppe ↕ Tilstand :</p> <p>Hjerte-K-Aalb Pauseret</p>
Se og opret Note	<p>Note er IKKE dokumentation men en "gul lap" til kliniker.</p> <p>Note vælges via fanebladet Noter i Patientmenu. På Overblik kan Tilføj note vælges, når musen holdes over patients navn.</p> <p>Vælg Note og Opret. Udfyld notetekst og Påmindelsestidspunkt. På påmindelsestidspunkt ses grå klokke ved patient på Overblik.</p> <p>Slet noten når den ikke længere er gældende. Når noten ikke er Markeret Set kan den redigeres og slettes ved at vælge Vis.</p>	 <p>010862-9996 Tilføj note</p> <p>Læst af ↓ Handlinger</p> <p>Q Vis Rediger</p>