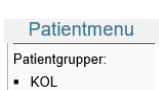


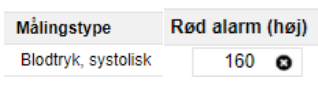
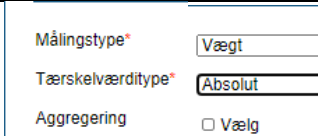


Ændre patientgruppe, dataansvarlig og tærskelværdi (Stamdata) i OpenTele



I Stamdata indgår oplysninger, som er udover traditionelle stamdata.

Handling	Forklaring	Navigation
Ændre Patientgruppe	<p>En Patientgruppe er det team, der har ansvaret for opfølgning på patients data. En patient kan have flere patientgrupper, men kun én er ansvarlig for opfølgning på patients data. En patients patientgrupper ses i Stamdata og på Patientmenu.</p> <p>Du ændrer Patientgruppe ved at vælge Rediger i patients Stamdata. Patientgruppe skal ændres, hvis ansvaret for opfølgning på data ændres. Du kan udelukkende vælge blandt de patientgrupper, du har brugeradgang til. <u>Obs. hvis du ikke kan vælge den ønskede patientgruppe, skal du kontakte TCN support</u> og få dem til at tildele patientgruppen.</p> <p>Obs. hold Ctrl nede når flere patientgrupper skal vælges.</p> <p>Hvis du forsøger at ændre patientgruppe, mens en anden patientgruppe er dataansvarlig, får du en advarsel. Du kan da først ændre patientgruppe, når dataansvarlig er fjernet.</p>	 <p>Patientmenu Patientgrupper: • KOL</p> <p>Patienten skal være i den patientgruppe, der er ansvarlig for patientdata.</p>
Tildel og skift dataansvarlig	<p>Du kan i Stamdata vælge at tildele patient én dataansvarlig patientgruppe blandt de patientgrupper, patient har tildelt. Dataansvarlig for patient ses derefter i Patientmenu.</p> <p>Du ændrer dataansvarlig ved at vælge Skift dataansvarlig og vælge ønsket patientgruppe.</p>	 <p>Patientmenu Dataansvarlig: Hjerte (TCN)</p>
Fjern dataansvarlig	<p>Hvis dataansvarlig skal være en patientgruppe, som patient ikke har i forvejen, skal du starte med at fjerne dataansvarlig.</p> <p>Vælg Skift dataansvarlig og Vælg, som er lig "et blankt felt" og gør, at dataansvarlig fjernes. Du kan nu ændre patientgruppe og efterfølgende vælge ny dataansvarlig.</p>	 <p>Skift dataansvarlig</p> <p>Hjerte (TCN) ▾ Vælg... Hjerte (TCN)</p>
Ændre tærskelværdi	<p>Når patientgruppe tildeles, får patient automatisk de foruddefinerede alarmgrænser, som er koblet til patientgruppen.</p> <p>Vælg Rediger i Stamdata hvis forudindstillede alarmgrænser skal tilrettes din patient. Vælg den ønskede Målingstype, hvorefter tærskelværdier ses og kan ændres.</p>	 <p>Målingstype Rød alarm (høj) Blodtryk, systolisk 160</p>
Tilføj Tærskelværdi	<p>Vælg Rediger Stamdata og Tilføj Tærskelværdi. Vælg Målingstype fx vægt og vælg Absolut ved Tærskelværditype. Indsæt alarmgrænser for rød høj og lav samt gul høj og lav.</p> <p>Obs. du skal altid selv tilføje alarmgrænser for vægt.</p>	 <p>Målingstype* Vægt Tærskelværditype* Absolut Aggregering <input type="checkbox"/> Vælg</p>