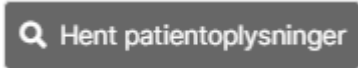


## Opret patient i OTH

Du udfylder én "boks" ad gangen, som bliver grøn når nødvendige oplysninger er der. Derefter kan du komme videre til næste "boks". Først når du har valgt Opret til sidst, er oplysninger gemte. Du kan efterfølgende ændre i oplysninger ved at vælge Rediger. Felt markeret med \* er obligatorisk.

Handling	Forklaring	Navigation
<b>Udfyld patient oplysninger og tlf. nr.</b>	Vælg Opret patient. Indtast patients CPR-nummer og vælg Hent patientoplysninger. Patientens fornavn, efternavn, køn, adresse, postnummer og by ses nu. Tjek om disse stamdata og kontaktoplysninger passer med oplysninger fra henvisning.  Tilføj patients tlf. nr. (fastnet og/eller mobil).	
<b>Tildel patient brugernavn og adgangskode</b>	Tildel patient et brugernavn i form af patientens CPR-nummer uden bindestreg. Slet indhold i felt med Midlertidig kode. Skriv i stedet ordet kode efterfulgt af de første 4 cifre i CPR-nummeret (ex: kode0510 hvis patient er født 5. oktober).  Ved første log ind skal patient ændre den midlertidige kode til ny kode med mindst 8 cifre (tal og bogstaver fra a - z).	<b>Brugernavn*</b> <input type="text" value="0510509999"/> <b>Midlertidig adgangskode*</b> <input type="text" value="kode0510"/>
<b>Tilføj pårørende</b>	Udfyld kontaktoplysninger på pårørende samt relation. Du kan tilføje flere pårørende.	
<b>Forstå Patientgruppe</b>	Patientgruppens navn: sygdom, K kommune, H hospital, kommune- eller hospitalsnavn. Kommuners patientgrupper består af to enslydende, hvor den ene ender på OA (overdraget ansvaret, så kommunen kan fremsøge patient når hospitalet har ansvaret).  Når hospitalet har ansvaret for opfølgning på patients data, <b>skal</b> patient have: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den kommunale OA-patientgruppe.</li> <li>• Hospitalets patientgruppe. Kontakt TCN support herom.</li> </ul>	Hospitalet følger op på data Hjerte-K-Rebild-OA Hjerte-H-AAUH-Aalborg
<b>Tilføj Patientgruppe</b>	Vælg Patientgruppe patient skal tilhøre. En patient kan have flere patientgrupper, men kun én er ansvarlig for opfølgning på patients data. Du kan kun vælge mellem patientgrupper, du har en brugeradgang til.  Obs. hold Ctrl nede når flere patientgrupper vælges.	Vælg en eller flere patientgrupper <hr/> KOL-H-AAUH-Aalborg KOL-K-Morsø-By-OA Hjerte-K-FRH-Sæby
<b>Tilret evt. Tærskelværdier</b>	Forudindstillede alarmgrænser er defineret af læger og ses ved hver måletype. Der er alarmgrænser for rød høj og lav samt gul høj og lav. Derudover ses måleenhed.  Tilret kun alarmgrænser, hvis der på henvisning er angivet individuelle alarmgrænser.	<b>Rød alarm (høj)</b> <input type="text" value="180"/> <b>Gul alarm (høj)</b> <input type="text" value="160"/> <b>Gul alarm (lav)</b> <input type="text" value="110"/> <b>Rød alarm (lav)</b> <input type="text" value="90"/>
<b>Gem</b>	Vælg Opret for at gemme. <b>Husk</b> at tildele monitoreringsplan, da patient ellers kun kan logge ind, men ikke indsende data.	
<b>Tilføj Tærskelværdi for vægt</b>	<b>Husk</b> at tilføje Tærskelværdi for vægt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg Stamdata og Rediger</li> <li>• Vælg Tilføj tærskelværdi og vægt ved Målingstype</li> <li>• Vælg Absolut ved Tærskelværditype</li> <li>• Hvis patients vægt ikke er oplyst på henvisning, beregnes og tilføjes tærskelværdi ud fra de første vægtmålinger, som angivet i instruks Forudindstillede alarmgrænser.</li> </ul>	