



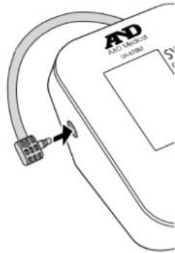


Brug af Blodtryksapparat – Foretag Måling

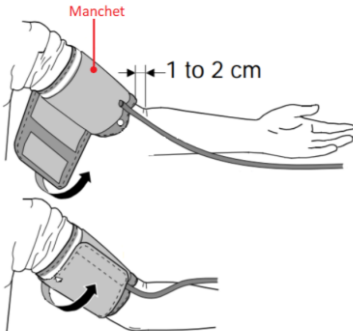

Handling	Forklaring	Illustration
Foretag måling		
Tjek manchetten	Tjek at manchetten sidder ordentligt fast, inden du påbegynder en måling.	
Sæt manchetten på armen	Sæt manchetten på armen som vist på tegningen. Der skal være 1-2 cm afstand til albueleddet. Støt armen på et underlag og slap af. Vent i 5 min. før du tager målingen.	
Tryk på start-knappen	Tryk på start-knappen for at starte en måling. Hvis du trykker på start-knappen mens målingen er i gang, afbrydes målingen.	
Aflæs måling	Når målingen er færdig vises den på displayet. Apparatet slukker af sig selv efter en måling, eller hvis du trykker på start-knappen efter målingen.	
Betydende tegn for måling	Dette symbol vil blinke når din puls er registreret. Dette symbol fremkommer i tilfælde af unormal puls.	

Brug af Blodtryksapparat – Foretag Måling



Handling	Forklaring	Illustration
	<p>Disse fire symboler har alle noget at gøre med forbindelsen mellem blodtryksapparatet og tabletten. Du skal ikke foretage dig noget.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Når målingen foretages i forbindelse med tabletten, skal du altid følge instruksen på tabletten. • Mens du måler, skal du sidde stille og ikke tale. • Du kan indstille manchetten, så den passer til din arm, så du bare "trækker" den på armen. • Du kan godt måle oven på et tyndt ærme. • Mål altid på samme arm. • Når manchetten pumpes op, kan den føles meget stram de første gange. Måleren vil "lære", hvor dine målinger typisk ligger, og tilpasse trykket i manchetten til dig. 	