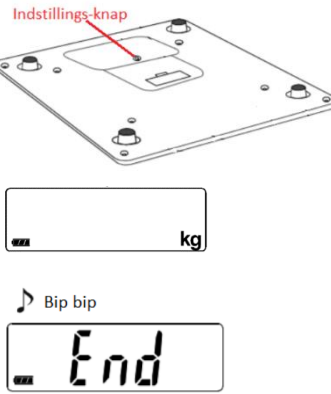
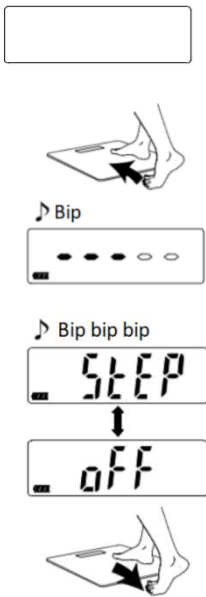


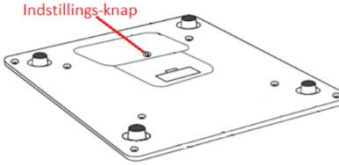

Brug af Bluetooth Vægt – Foretag Måling



Handling	Forklaring	Illustration
Foretag måling		
Sørg for du måler i kg	<p>Vend vægten om. Over batteridækslet finder du en indstillings-knap. Tryk på knappen indtil der står kg på displayet forrest på vægten.</p> <p>Når du har sikret der står kg på displayet, skal du vente til du hører to lyde i form af to *bip*, hvorefter der vil stå "End" på displayet. Din indstilling er nu gemt, og vægten slukker automatisk.</p>	
Foretag vejning	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sørg for at vægten er slukket før du tager målingen. Vægten er slukket hvis displayet er helt blank. 2) Målingen starter så snart du træder op på vægten. Når du træder op på vægten, vil du høre en lyd i form af et enkelt *bip*, hvorefter der fremkommer streger på displayet. Mens stregerne er på displayet, er målingen i gang. 3) Når målingen er færdig, vil du høre tre lyde i form af tre *bip*, hvorefter der på displayet fremkommer teksten "step off". Du skal nu træde af vægten. Din vægt vil fremkomme på displayet når du er trådt af vægten. 	
Bekræft din måling	Din vægt sendes automatisk til tabletten.	

Brug af Bluetooth Vægt – Foretag Måling



Handling	Forklaring	Illustration
Sluk vægten	<p>Vægten slukker automatisk 1 minut efter din vægt er fremkommet på displayet.</p> <p>Vægten kan også slukkes, ved at trykke på vægten med din ene fod, mens din vægt vises på displayet.</p> <p>Du kan også altid slukke vægten ved at trykke på indstillings-knappen, som du finder på bagsiden af vægten.</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Når målingen foretages i forbindelse med tabletten, skal du altid følge instruksen på tabletten.• Mens målingen er i gang, skal du stå så stille som muligt.• Du må ikke træde op på vægten med våde fødder.• Placer vægten på et fast underlag.• Stå med fødderne ligeligt fordelt på begge sider af vægten, og trød ikke på displayet.• Vej dig på samme tidspunkt hver gang, f.eks. om morgenen, og hav den samme type tøj på.• OBS! Vægten må ikke stå på et vådt underlag og må ikke udsættes for fugt.	